

Mit dem maßgefertigten **VAKUPLEX** Rückenkissen können wir Patienten helfen, für die der Standard-Rollstuhl keine ausreichende, sichere Lagerung darstellt. Es kann in jeden vorhandenen Rollstuhl eingesetzt werden und stellt eine individuelle und kostengünstige Versorgung dar.

Optimale Versorgung bei Krankheitsbildern wie:

- Schlaganfall
- Multiple Sklerose (MS)
- Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
- Spastische Lähmung
- Inaktivitätsatrophie durch Demenzerkrankung

Bei entsprechender Rezeptierung werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen.

For some patients the standard wheelchair can not be an adequate and safe solution. The **VAKUPLEX** back cushion is a solution for this group of patients. **VAKUPLEX** can be assembled to every wheelchair easily to provide an individual and cost saving supply.

Reliable supply for diseases like:

- Apoplectical Insult (Stroke)
- Multiple Sclerosis
- ALS
- Cerebral palsy
- Disuse atrophy caused by Dementia




#### **VAKUPLEX - Es kann so einfach sein**

Standard-Rollstühle stellen das am meisten verbreitete Hilfsmittel für die Mobilität von Menschen mit Behinderung oder Seniorinnen und Senioren dar. Die herkömmlichen Sitz- und Rückenkissen bieten oftmals den Patienten nicht genügende Stützfunktionen an. So sind Haltungsfelder (Hängen nach vorn oder zur Seite) bei Rollstuhlnutzern zu beobachten. Dieses nicht physiologische Sitzen führt zu verminderter Wahrnehmung des Umfeldes und schränkt viele Fähigkeiten im Alltag ein. **VAKUPLEX** wirkt dem entgegen und erleichtert die Teilnahme am täglichen Leben.

#### **VAKUPLEX - makes things easier!**

Standard wheelchairs are very common. They provide mobility for handicapped or elderly people. Conventionally seat- or back cushions can not provide enough support quite often. False posture and dangerous slumping down towards the front or to the side can be often observed in wheelchairs. Non physiological positioning causes a poor perception and restrict many all day abilities. **VAKUPLEX** opposes this development and facilitates participation in daily life.

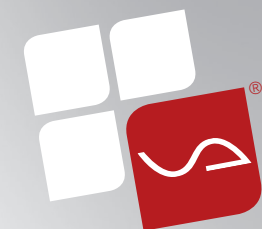

 **VAKUFORM®**

**VAKUPLEX**

**Rückenkissen für  
Standard-Rollstühle**

Back cushion for  
standard wheelchairs

 **VAKUFORM®**

**VAKUFORM GmbH**

Weiterstädter Landstraße 13  
D 64291 Darmstadt

Tel +49 (0) 6151 9183610  
Fax +49 (0) 6151 9183620  
kontakt@vakufarm-reha.de  
**vakufarm-reha.de**

**Michael Benzinger**  
Vertriebsleiter / Sales Manager  
Mobile +49 (0) 177 6280517  
mbreha@aol.com

 **VAKUFORM®**

**VAKUPLEX**

**vom Standard zum  
individuellen Sitzsystem**

from standard solution  
to individuality

**VAKUPLEX** verwandelt den Standard-Rollstuhl in Ihr individuelles Sitzsystem. Dieser Leichtbaurücken in Vakuumtechnik kann mit wenigen Handgriffen der Körperform angepasst werden und ist in nahezu jedem Standard-Rollstuhl nachrüstbar. Durch die leicht zu bewerkstelligende körpergerechte Anformung entsteht sicherer Halt.

Abbildung: Rückenkissen mit Bezug

Abgebildete Rollstühle gehören nicht zum Lieferumfang. Zubehör wie z.B. Pumpen finden Sie im Katalog oder in unserer Preisliste.

**VAKUPLEX** transforms your standard wheelchair into an individual positioning system. Exact body shaping by easy handling creates a safe support.

Image: back cushion with cover

Wheelchairs in the images are not part of delivered items.



#### VAKUPLEX Rückenkissen

- Vakuumierbares Rückenkissen aus PU
- Einzelanfertigung in verschiedenen Größen

73000-M/L	Größe M	Größe L
Rückenbreite (RB):	bis zu 40 cm	bis zu 46 cm
Rückenhöhe (RH):	55 cm	65 cm
Pelottenhöhe (PH):	40 cm	46 cm
Pelottentiefe (P):	25 cm	25 cm
Polsterdicke (D):	5 cm	5 cm

Zum Lieferumfang gehören jeweils :  
**VAKUPLEX** Rückenpolster aus PU, Bezug, Ballpumpe

#### VAKUPLEX Back cushion

- Vacuum back cushion made of PU
- Custom made in different sizes

73000-M/L	Medium	Large
Back width (BW):	up to 40 cm	up to 46 cm
Back height (BH):	55 cm	65 cm
Trunk support height (TH):	40 cm	46 cm
Trunk support depth (TD):	25 cm	25 cm
Thickness of upholstery (TU):	5 cm	5 cm

Items delivered:  
**VAKUPLEX** Back cushion, cover, hand pump



**VAKUPLEX Rückenkissen mit Bezug** Back cushion with cover

**VAKUPLEX Rückenkissen ohne Bezug** Back cushion without cover

**VAKUPLEX**

**kein Standard, sondern individuell**  
 no standard but individual

Das **VAKUFORM**-Prinzip: Ein vakuumierbares Polster aus hochwertigem PU-Material, gefüllt mit feinem Poly-styrol, wird im weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Abpumpen der Luft entsteht ein festes Polster, das dem Rumpf Halt und Stabilität gibt.

The **VAKUFORM** principle: While being soft (non-vacuum state) a vacuum support cushion made of high quality PU, filled with fine polystyrene granules, can be customised and adapted to fit the user's body shape. A firm cushion that gives the body support and stability will be easily created by extracting air (vacuum state).