



VAKUSAN – Die Lösung für Bad und WC


Mit unseren neuartigen **VAKUSAN** Produkten bieten wir Ihnen eine kostengünstige, individuell anpassbare Lösung für die Pflege – auch zu Hause. Unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Vakuum-Hilfsmitteln für den Reha-Bereich haben wir genutzt, um für Sie preiswerte, praxisnahe Alltagshilfen zu schaffen. Die neue **VAKUSAN** Produktlinie schließt eine Lücke im Badebereich und beim Toilettengang. Die Erleichterung der Pflege, verbunden mit einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort, erhöht die Lebensqualität.

Das Prinzip Ein vakuumierbares Stützkissen aus hochwertigem PU-Material, gefüllt mit feinem Polystyrolgranulat wird im weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Absaugen der Luft entsteht ein festes Polster, das dem Körper Halt und Stabilität verleiht.

VAKUSAN – The bathing and toilet area solution

With our new **VAKUSAN** products, we offer affordable and customisable solutions for care – even at home. We have used our experience in developing and manufacturing high quality vacuum aids within the rehabilitation area for many years, to create useful everyday living aids to offer our customers a safe and convenient support. Our new **VAKUSAN** product line closes a gap in the bathing and the toilet area by combining the facilitation of care with high levels in safety and convenience increasing the user's quality of life.

The principle While being soft (non-vacuum state) a vacuum support cushion made of high quality PU material, filled with fine polystyrene granules, can be customised and adapted to fit the user's body shape. A firm cushion that gives the body support and stability will be easily created by extracting air (vacuum state).

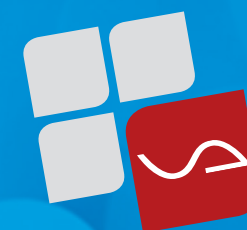

**NEU!
NEW!**

VAKUSAN Toilettensitz | Toilet seat

 VAKUFORM®

VAKUFORM GmbH

Weiterstädter Landstraße 13
D 64291 Darmstadt

Tel +49 (0) 6151 9183610
Fax +49 (0) 6151 9183620
kontakt@vakufarm-reha.de
vakufarm-reha.de



**NEU!
NEW!**

 VAKUFORM®

VAKUSAN

Die Lösung für Bad und WC
The bathing and toilet area solution

72000 | VAKUSAN Rückenkissen

- sicherer Halt durch seitliche Führung
- geeignet für den Badelift, den Toiletten- und Duschstuhl
- einfache Handhabung
- stabile Anbringung durch zwei große Saugnäpfe
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Rückenhöhe: 56 cm
Rückenbreite: 32 cm bis 40 cm

72000 | VAKUSAN Back cushion

- safe hold with lateral support
- suitable for bath lifts, toilet and shower chairs
- easy to use
- stable attachment by two large sucker cups
- easy to clean and disinfect

Back height: 56 cm
Back width: 32 cm to 40 cm



70000 | VAKUSAN Badehilfe*

- individuelle Anpassung an den gesamten Körper garantiert Sitzstabilität während des Badens
- schützt vor Herausgleiten und erhöht die Sicherheit
- mit und ohne integriertem Kopfpolster
- sichere Fixierung durch acht Saugnäpfe
- durch Anformung für alle handelsüblichen Badewannen passend (bei rauen Oberflächen können sich die Saugnäpfe lösen)
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Rückenhöhe: 70 cm (70000-2 mit Kopfteil 105 cm)
Rückenbreite: 70 cm
Sitztiefe: 45 cm
Sitzbreite: 65 cm
Kissendicke: 7 cm

70000 | VAKUSAN Badehilfe | Bath support*

- individual adaptation to the user's body guarantees seat stability while bathing
- prevents sliding out and increases safety
- with or without integrated headrest
- securely fixed by eight sucker cups
- suitable for all bath tubs by shaping (sucker caps could become detached on abrasive surfaces)
- easy to clean and disinfect

Back height: 70 cm (70000-2 with head section 105 cm)
Back width: 70 cm
Seat depth: 45 cm
Seat width: 65 cm
Cushion thickness: 7 cm



70005 | VAKUSAN Toilettensitz


- sicherer Halt auf der Toilette, dem Dusch- oder Toilettenstuhl
- körpergerechte Anformung im Sitzbereich
- einfache Handhabung
- stabile Anbringung durch vier Saugnäpfe
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 46 cm
Pflegeöffnung: 18 x 26 cm

70005 | VAKUSAN Toilet seat

- a secure hold and seat support on shower and toilet chairs or WC
- formfitting adaption within the seating area
- easy to use
- stable mounting by four sucker cups
- easy to clean and disinfect

Seat width: 48 cm
Seat depth: 46 cm
Care support: 18 x 26 cm

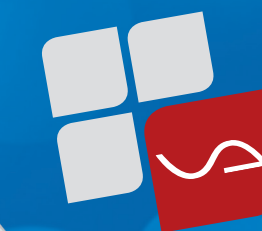

VAKUSAN Rückenkissen | Back cushion

VAKUSAN Badehilfe | Bath support *

VAKUSAN Toilettensitz | Toilet seat